

NEODEC®



**DÜNAAMILISE SURVERAVI
MADRATSIKATTE SÜSTEEM**




**REAL
OLSZTYN**



NEODEC®

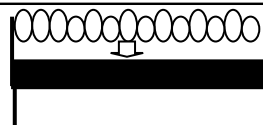
NEODEC®-i terapeutiline tugipind pakub tõhusat muutuva survega leevendust koos ainulaadse Easy Turn tehnoloogiaga, niiskuse reguleerimise ja muude täiustatud lahendustega patsiendihoolduse laiaulatuslike probleemide korral. NEODEC®-i soovitatakse ööpäevaringseks kasutamiseks survest tingitud lamatiste ennetamiseks ja kõigi survest tingitud lamatiste staadiumite raviks⁽¹⁾.

KATEGORIA	
1	2
3	4

KAALUPIIR
200kg

EASY TURN TEHNOLOOGIA
LATERAALNE PÖÖRAMINE / PIDEV PÖÖRAMINE


KASUTUSREŽIIMID
 MUUTUV
 STAATILINE

MADRATSIKATE


MADRATSIKATE

- Modulaarne ehitus hoolduse lihtsustamiseks
- Easy Turn tehnoloogia funktsioon hõlbustab õendushooldust (nt patsiendi asendi muutmist, linade vahetust), parandab surve jaotust muutavas töörežiimis ja parandab patsiendi mugavust
- Sõltumatu Micro Air Loss (iMAL) funktsioon tagab patsiendi maksimaalseks mugavuseks õhutatud ja kuiva pinna
- Kuni 24-tunnine transpordirežiim tagab patsiendile toe transportimise või elektrikatkestuse ajal



EASY TURN TEHNOLOOGIA

Sujuv madratsi lateraalne kallutamine või pidev pööramine (pöörab ainult paremale või vasakule ning mõlemale küljele). Mõeldud abistama nii patsiente kui ka hooldajaid. Tänu manuaalselt käsitsetavatele klappidele lihtne kasutada (ei ole vaja muuta pumba seadistusi).



EELISED

- Vähendab hooldusõdede sekkumist patsiendiga ümber käimisel
- Vähendab õdede füüsilise vigastuse ohtu patsiendiga ümber käimisel
- Sästab õendushoolduseks kuluvat aega
- Parandab survest tingitud lamatiste ennetamist
- Aitab parandada liikumisvõimetute patsientide elukvaliteeti

PUMP

- Kasutajasõbralik juhtpaneel
- Manuaalne mugavuse juhtimine
- Kaks töörežiimi: muutuv ja staatiline (automaatne taaste pärast 30 minutit)
- Reguleeritav tsükkel: 10, 15 või 20 minutit
- Audiovisuaalsed alarmid: madal surve, elektrikatkestus ja hooldus
- Lukustusfunktsioon kaitseb patsiendipõhiseid seadistusi



PEALMINE KATE

- Auru läbilaskev ja veekindel, et tagada patsiendi mugavus ja hügieen
- Antibakteriaalne, seentevastane
- Kahes suunas veniv pealmine kate, mis vähendab hõõrdumist ja nihkejõudusid.
- Kinnitatud alusmadratsile varjatud klambritega, et vähendada vedelike sisseimbumist
- Leeke summutav, lihtsasti puhastatav ja pesemiseks täielikult eemaldatav

iMAL


Sõltumatu Micro Air Loss süsteem (independent Micro Air Loss, iMAL) vähendab madratsisse kogunenud soojust, mis parandab patsiendi mugavust ja tagab tema keha ümber õige mikrokliima. iMALi süsteem on madratsi elementidest sõltumatu ja ei sega transpordifunktsioone. iMALi süsteem töötab automaatselt ega vaja seadistamist.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

MADRATSIKATE

Tellimiskood	13011T
Mõõtmed	200 x 85 x 13cm (± 1 cm)
Elementide arv	16
Elemendi materjal	TPU
Kattematerjal	Polüester – PU
Mattress base material	Polüester – PU
Max. patsiendi kaal	200 kg

PUMP

Tellimiskood	NEODEC ND100
Mõõtmed	33 x 22 x 12 cm
Ümbrise materjal	ABS
Töörežiim	pidev
Toitepinge/sagedus	230 V/50 Hz
Võimsusväljund	8 W
Töotsüklid	10, 15, 20 minutit
Kaitseaste elektrilöögi vastu	klass II, tüüp BF 
Kaitseaste vedelike sisseimbumise vastu	IP21

⁽¹⁾Riiklik survest tingitud lamatiste nõuandekomisjon, Euroopa survest tingitud nõuandekomisjon ja Vaikse ookeani ülene survest tingitud vigastuste liit. Survest tingitud lamatiste ennetamine ja ravi Kiirjuhend. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Perth, Austraalia; 2014



Meie ettevõtte asutati 1993. aastal ja sel on peaaegu 30-aastane kogemus lamatiste ennetuses ja ravis. Lisaks oma toodete kõrgele kvaliteedile pöörame suurt tähelepanu ka keskkonnakaitsele. Oma teenuste hea kvaliteedi tagamiseks oleme rakendanud järgmisi ISO standardeid:

ISO 13485:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



**REAL
OLSZTYN**



PPH „Real”
ul. Kasztanowa 27, 10-156 Olsztyn, Poola
Tel. 0048 89 534 51 61, Faks 0048 89 533 39 78
www.real.olsztyn.pl, e-post: office@real.olsztyn.pl

Arendame pidevalt oma poliitikat ja jätame endale õiguse muuta mudeleid ja tehnilisi andmeid ilma eelneva ette teatamiseta. Neodec® ja Autodec® on PPH „Real” kaubamärgid.
Viimati muudetud: 15.09.2021